

シチズン電子体温計 CT515

●保証書●

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に不具合が生じた場合は、まず次の点を調べてください。

こんなとき	点検するところ	直しかた
スイッチを押してもなにも表示しない。	●電池が正しく入っていますか。 ●電池が消耗していませんか。	●電池の方向を確認して正しく入れてください。 ●新しい電池に交換してください。
検温値が低めに表示される。	●わき下に汗をかいていませんか。 ●わき下がゆるんでいませんか。 ●測温部がわき下のへこんだ部分からはずれていませんか。 ●口を開いていませんか。 ●測温部が舌下からはずれていませんか。 ●低温(10℃以下)で保管していませんか。	●添付文書(取扱説明書)の【操作方法又は使用方法等】の(2)を確認し、再度正しく検温してください。 ●室温(10℃以上)にて再度検温してください。
検温値が高めに表示される。	●高温(32℃以上)で保管していませんか。	●添付文書(取扱説明書)の【使用上の注意】の(3)を確認し、再度正しく検温してください。

◆保証規定◆

- 有効保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- ご使用中、故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室へ、本証に現品を添えてお申し出くださるかまたはお送りください。
- ただし、下記の場合は保証期間中でも有料修理になります。
 - ご使用上で取り扱いの過誤(落としたり、強いショックを与えるなど)により発生した故障。
 - 製品の改造、あるいは不当な修理により発生した故障。
 - 火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障および損傷。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - 保証書のご提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

製造販売元 シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

特長

- 大きな文字と見やすい液晶
- 前回の検温値を自動メモリー
- 抗菌・防水仕様で洗えて清潔
- 服を着たままでも はかりやすいコンパクトボディ
- 電池長持ち3年間(1日1回10分使用時)
- 収納ケース付き

体温測定は健康管理の第一歩！ 定期的に検温しましょう！

平熱を測りましょう

一般には、赤ちゃんの体温は高く、幼児や子供も大人より高め、お年寄りになると体温は低めになります。また一日の中でも早朝は低く、昼過ぎは高いのが一般的です。(平熱には個人差があります)定期的に検温して、自分の平熱を知ることは、健康管理の大切な指標になります。

測定温度と平衡温


体温は腋下(わき下)、舌下(口中)、直腸などで測るのが一般的です。

日本では、わき下での検温が主流です。検温を開始してから、検温部が体の内部の温度近くまで温まり、これ以上上昇しない温度(平衡温)になるのに、わき下の場合およそ10分かかります。

本製品は温度上昇が緩やかに(0.01℃/8秒)になるとブザーが鳴ります。


この時の温度は平衡温より少し低い値になります。ブザー報知時の検温値は、平衡温になる前のめやすの温度です。健康時にブザー報知時の温度と平衡温を検温してお確かめになり、普段の健康管理にお役立てください。平衡温を測定する場合はわき下で10分以上、口中で5分以上検温してください。

<わき下検温の温度上昇カーブ>

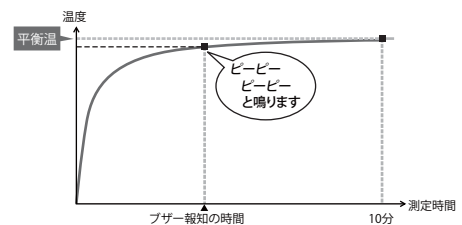

汗をかいたり、測温部がわき下のへこんだ部分からはずれたり、検温中に測温部が動いたりすると、低めの検温値が表示されます。

<低い検温表示の温度上昇カーブ例>

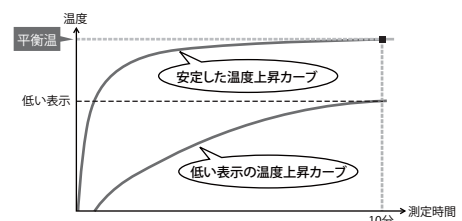

保証書

持込修理

CITIZEN
Micro HumanTech

このたびは、シチズン電子体温計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えて、お買い上げの販売店または弊社までご持参ください。保証期間内に限り、無料で修理・調整させていただきます。お客様にご記入いただきたい本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売名 シチズン電子体温計 CT515

お客様お名前 様 TEL - -

ご住所 〒

※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。

ご購入日 年 月 日

ご購入店

保証期間 ご購入日より1年間

製造販売元 シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。

受付時間：10～17時
月～金(祝祭日、年末年始を除く)

0120-88-6295
通話料金は無料です

E-mail: support@systems.citizen.co.jp

http://www.citizen-systems.co.jp